


INFORMACIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DEL TEST

Antes de la toma de muestra: sonarse varias veces y lavarse las manos


1. Abrir solución y verter contenido en el tubo.
Usar a temperatura ambiente.

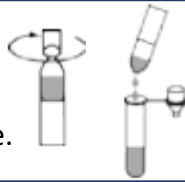


2. Sacar el hisopo sin tocar la punta textil.



3. Introducir el hisopo en fosa nasal. Girarlo a lo largo de la mucosa. Repetir el procedimiento en la otra fosa nasal.

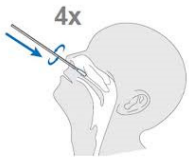

2,5 cm de profundidad

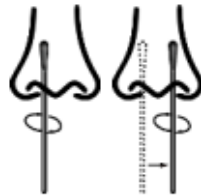

4. Introducir hisopo con muestra en el tubo. Girarlo 3-5 veces y dejar el tiempo que marque el fabricante




Hacer el test inmediatamente después de tomar la muestra.

5. Comprimir con los dedos el tubo de extracción. Retirar el hisopo y desecharlo.



6. Colocar tapón con cuentagotas sobre el tubo y colocar el número de gotas según la ficha del producto en el pocillo.

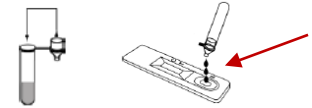

Desechar el dispositivo en la basura orgánica


INFORMACIÓN SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



Tiempo estipulado




Test Positivo

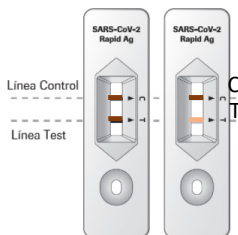


C y T en color

Test Negativo

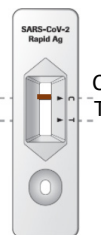

C en color

Test No Válido

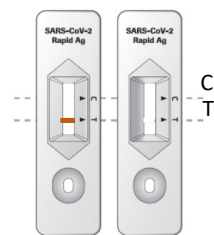

C SIN color

CÓMO PROCEDER EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS

Test Positivo



Existe infección activa por SARS-COV-2



Aislamiento



Contactar con los servicios sanitarios

Test Negativo



Si hay sintomatología



Aislamiento



Contactar con los servicios sanitarios



Si NO hay sintomatología



Mantener medidas de prevención

Test No Válido



Repetir test